

www.adventlife.net

Петслойни цветни FFP2 маски  
(SERIX)

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЦВЕТОВЕ  
ИНДИВИДУАЛНО ОПАКОВАНИ  
ОГРОМЕН КАПАЦИТЕТ НА  
ПРОИЗВОДСТВО



БЯЛ



ЗЕЛЕН



СИН



ЧЕРЕН

ADVENT *life*  
Health in Your Hands

SERIX

Нашата амбиция е да направим здравеопазването широко достъпно в световен мащаб, чрез бързи тестове за лична употреба.

Водени от иновативен дух, **Advent Life** специализира в производство и разпространение на бързи тестове за широк спектър от здравословни състояния като същевременно предлага и други продукти, които позволяват на всеки да се погрижи за здравето си. Даваме възможност на хората да направят първата крачка сами и в удобно за тях време.

**Advent Life** се фокусира върху най-доброто качество на безопасни и лесни за използване продукти. Предлагаме премиум марки, които се доставят до аптеки, болници, лаборатории, обществени организации и държавни институции.

За повече информация, посетете [www.adventlife.net](http://www.adventlife.net).

## КАКВО Е COVID?

Covid-19 е остро респираторно инфекциозно заболяване, причинено от SARS-CoV-2. Най-често срещаните симптоми са кашлица и повишена температура, но е възможно да се появяват и болки в гърлото, главоболие и болки в мускулите, както и обща отпадналост и задух.

Гадене, конюнктивит, подуване на лимфните възли и сънливост, промяна или загуба на вкус и обоняние са някои от по-рядко срещаните признаци на заболяването.

При някои хора инфекцията може да протече безсимптомно, но също така може да засегне дихателната и други системи в човешкото тяло. При тежки случаи симптомите могат да включват недостиг на въздух и болки в гърдите, а заболяването да доведе до нужда от специализирани медицински грижи или хоспитализиране.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предпазните FFP2 маски са с дизайн, който приляга плътно към лицето и много ефективно филтрира въздушни частици. Подходящи са за медицинска и ежедневна употреба.

Имат традиционна изпъкнала форма, със скоба на носа и дизайн с двойни ластички за ушите.

Маските в тази опаковка не съдържат стъклени влакна, латекс и други алергени. Имат висока бактериална филтрация.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ВFE филтър  $\geq 94\%$ /двоен филтър

Размер: 15.5 см / 12 см

Цветовете: бял, син, черен, зелен

За медицинска и ежедневна употреба.

Традиционна изпъкнала форма, със скоба на носа и дизайн с двойни ластиси за ушите.

Еднократна, нестерилна, без латекс, стъклена влакна и други алергени. Висока бактериална филтрация. Български, английски, гръцки, немски, чешки и румънски език на опаковката.

## РЕГИСТРАЦИИ И СЕРТИФИКАТИ НА ЕС

СТАНДАРТ EN 149:2001 + A1:2009

СЕ МАРКИРОВКА НОТИФИЦИРАН ОРГАН 1463

Съответствие със стандарта: Директива за медицинските изделия - 93/42/ЕЕС EN 14683: 2019+AC: 2019 Медицински маски за лице.

## СЪСТАВ

5 слоя:

- 50 г нетъкан текстил
- 25 г разтопен текстил
- 50 г памук с горещ въздух
- 25 г разтопен текстил
- 30 г нетъкан текстил; скоба на носа, която предотвратява изтичането на въздух.

## СЪДЪРЖАНИЕ:



На брой | Хигиенично опаковани в блистер

20 броя в кутия | Тегло: 162 г

50 кутии в кашон | Тегло: 6,5 кг

20 кашона в палет | Тегло: 145 кг

20 000 броя в палет

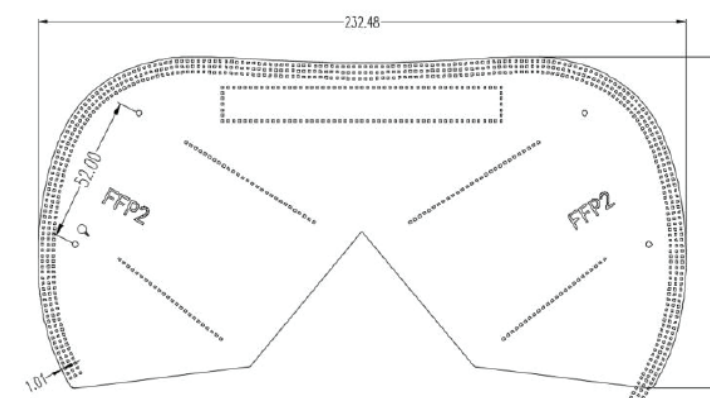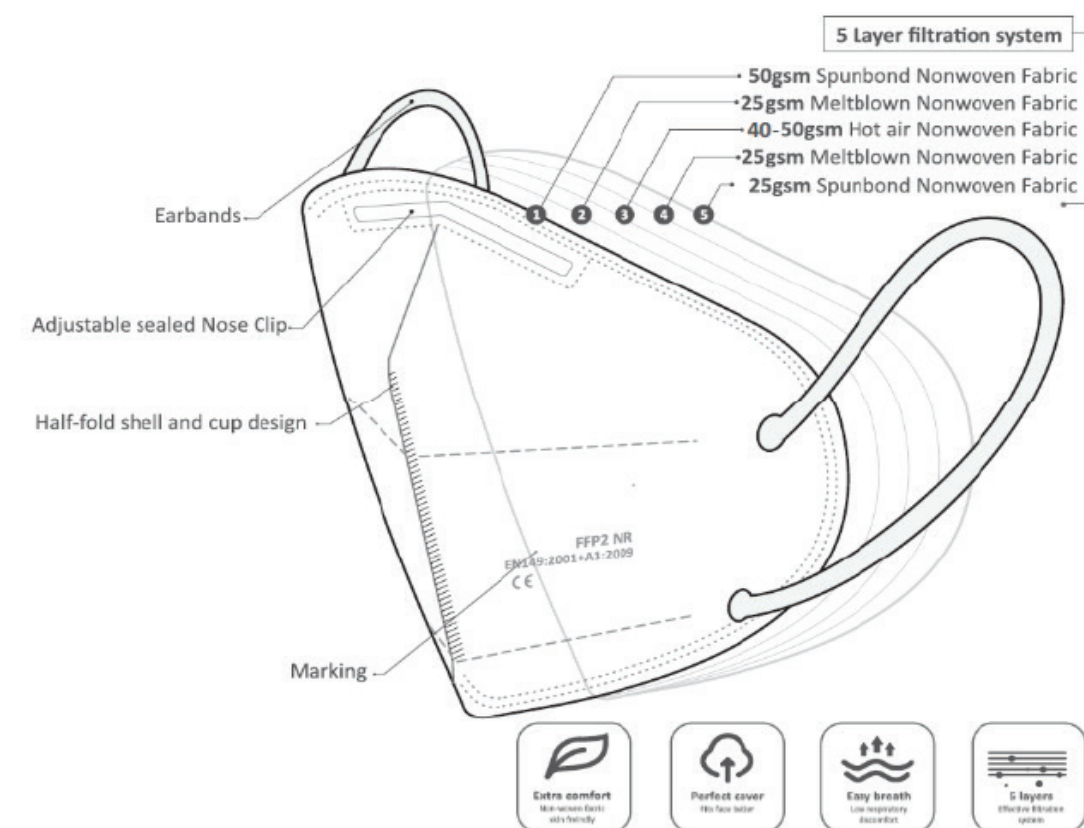

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Измийте ръцете си със сапун и вода или с хидроалкохолен разтвор.
2. Нагласете ластичите зад ушите.
3. Сложете маската, така че да покрива носа и устата.
4. Смъкнете долната част на маската под брадичката.
5. За да махнете маската, хванете я за ластичите зад ушите (не докосвайте предната част на маската).
6. След всяка употреба изхвърляйте маската в затворена кофа. Измийте ръцете си със сапун и вода или с хидроалкохолен разтвор след всяко ползване.

## СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте до 25 °C на сухо и проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина.

Почистване/Дезинфекция:

Нестерилна маска за еднократна употреба. Не почиствайте и не дезинфекцирайте маската след употреба.

Максимално време за носене на маска: 4 часа

Не се препоръчва за деца под 3 години и хора със сърдечно-белодробни проблеми.