

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЦВЕТОВЕ  
ИНДИВИДУАЛНО ОПАКОВАНИ  
ОГРОМЕН КАПАЦИТЕТ НА  
ПРОИЗВОДСТВО



ЗЕЛЕН



СИН



РОЗОВ



ЖЪЛТ



ЧЕРЕН

Нашата амбиция е да направим здравеопазването широко достъпно в световен мащаб, чрез бързи тестове за лична употреба.

Водени от иновативен дух, **Advent Life** специализира в производство и разпространение на бързи тестове за широк спектър от здравословни състояния като същевременно предлага и други продукти, които позволяват на всеки да се погрижи за здравето си. Даваме възможност на хората да направят първата крачка сами и в удобно за тях време.

**Advent Life** се фокусира върху най-доброто качество на безопасни и лесни за използване продукти. Предлагаме премиум марки, които се доставят до аптеки, болници, лаборатории, обществени организации и държавни институции.

За повече информация, посетете [www.adventlife.net](http://www.adventlife.net).

## КАКВО Е COVID?

Covid-19 е остро респираторно инфекциозно заболяване, причинено от SARS-CoV-2. Най-често срещаните симптоми са кашлица и повишена температура, но е възможно да се появяват и болки в гърлото, главоболие и болки в мускулите, както и обща отпадналост и задух.

Гадене, конюнктивит, подуване на лимфните възли и сънливост, промяна или загуба на вкус и обоняние са някои от по-рядко срещаните признаци на заболяването.

При някои хора инфекцията може да протече безсимптомно, но също така може да засегне дихателната и други системи в човешкото тяло. При тежки случаи симптомите могат да включват недостиг на въздух и болки в гърдите, а заболяването да доведе до нужда от специализирани медицински грижи или хоспитализиране.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Когато е правилно поставена, медицинската маска служи, за да блокира капки или пръски, които могат да съдържат микроби (вируси и бактерии). По този начин, маската предотвратява възможността те да достигнат до устата или носа.

Медицинската маска също помага за предпазването на околните, ограничавайки излагането им на слюнка и респираторни секрети.

Медицинските маски в тази опаковка са хипоалергенни, не съдържат стъклени влакна или латекс. Дизайнът им включва удобна щипка за нос. Самите маски, както и опаковката, могат да се персонализират.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ефективност на бактериална филтрация (BFE) (%): 99.98

Налягане при вдишване (КРА): 30

Размер: 16.8 см / 9.4 см

Цветовете: син, зелен, розов, жълт, черен

Щипка за нос

Без стъклени влакна, без латекс, хипоалергени.

Английски, френски, немски и унгарски език на опаковките. Възможно е персонализиране на опаковката и маските. Опаковката може да се отпечата на всеки език.

## РЕГИСТРАЦИИ И СЕРТИФИКАТИ НА ЕС

СТАНДАРТ EN 149: 2001 + A1: 2009

В съответствие със стандарта: Директива за медицинските изделия -93/42/ЕЕС EN 14683: 2019+AC: 2019 Медицински маски за лице

## СЪСТАВ:


3 слоя:

- Външен: Нетъкан полипропилен със спинбонд
- Среден: Разтопен нетъкан полипропилен
- Вътрешен: Нетъкан полипропилен със спинбонд

Ластиси за ушите

## СЪДЪРЖАНИЕ НА 1 ОПАКОВКА:

50 броя в кутия | Тегло: 250 г  
40 кутии в кашон | Тегло: 10.00 кг  
20 кашона в палет | Тегло: 215 кг  
40 000 броя в палет

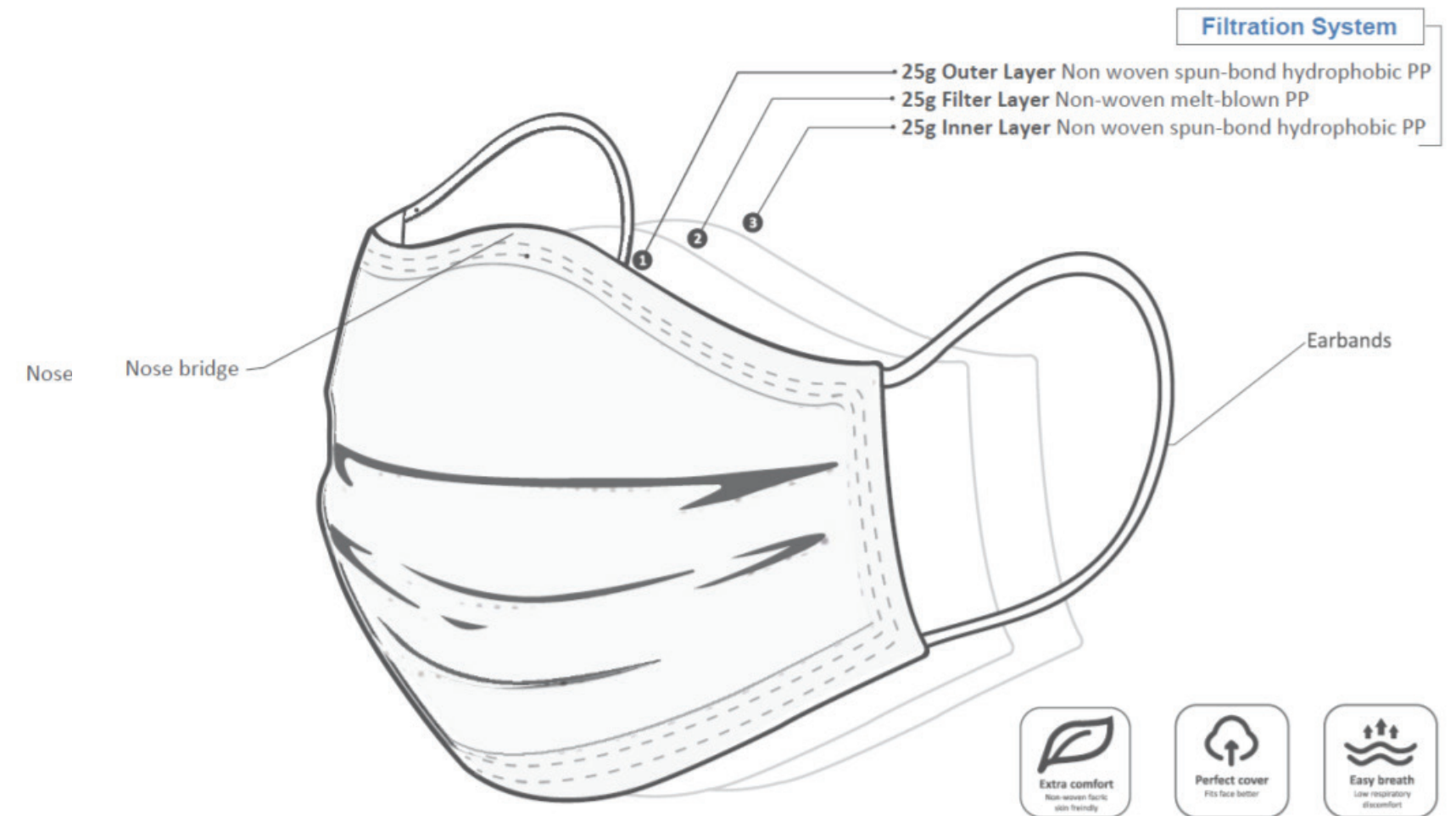

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Измийте ръцете си със сапун и вода или с хидроалкохолен разтвор.
2. Нагласете ластичите зад ушите.
3. Сложете маската, така че да покрива носа и устата.
4. Смъкнете долната част на маската под брадичката.
5. За да махнете маската, хванете я за ластичите зад ушите (не докосвайте предната част на маската).
6. След всяка употреба изхвърляйте маската в затворена кофа. Измийте ръцете си със сапун и вода или с хидроалкохолен разтвор след всяко ползване.

## СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте до 25 °C на сухо и проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина.

Почистване/Дезинфекция:

Нестерилна маска за еднократна употреба. Не почиствайте и не дезинфекцирайте маската след употреба.

Максимално време за носене на маска: 4 часа

Не се препоръчва за деца под 3 години и хора със сърдечно-белодробни проблеми.